

## **MESA DE FUERZA**

### **OBSERVACIÓN SOBRE LOS DERECHOS AUTORALES**

Este manual está protegido por las leyes de derechos autorales y todos los derechos están reservados. Está permitida y garantizada para instituciones de enseñanza, no obstante, la reproducción de cualquier parte de este manual para que se la suministre y utilice en los laboratorios pero no para su venta. Su reproducción bajo cualquier otra circunstancia, sin la debida autorización de la AZEHEB está terminantemente prohibida.

### **GARANTÍA**

La AZEHEB garantiza este producto contra defectos de fabricación por un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío al cliente. La AZEHEB reparará o cambiará el producto defectuoso si se constata que el defecto fue ocasionado por problemas en los materiales que lo componen o por fallas en su fabricación.

Esta garantía no cubre problemas ocasionados por abuso o debidos al uso incorrecto del producto.

La determinación de si el defecto del producto es resultado de una falla de fabricación o si fue ocasionado por uso indebido será llevada a cabo únicamente por la AZEHEB.

#### **Dirección:**


AZEHEB | Laboratórios de Física  
R Arthur Bernardes, 137 - 2º andar  
CEP 36300-076  
São João Del Rey - MG - Brasil

Teléfono: +55 32 3371-3191  
E-mail: [exportacion@azeheb.com](mailto:exportacion@azeheb.com)





# EQUIPO

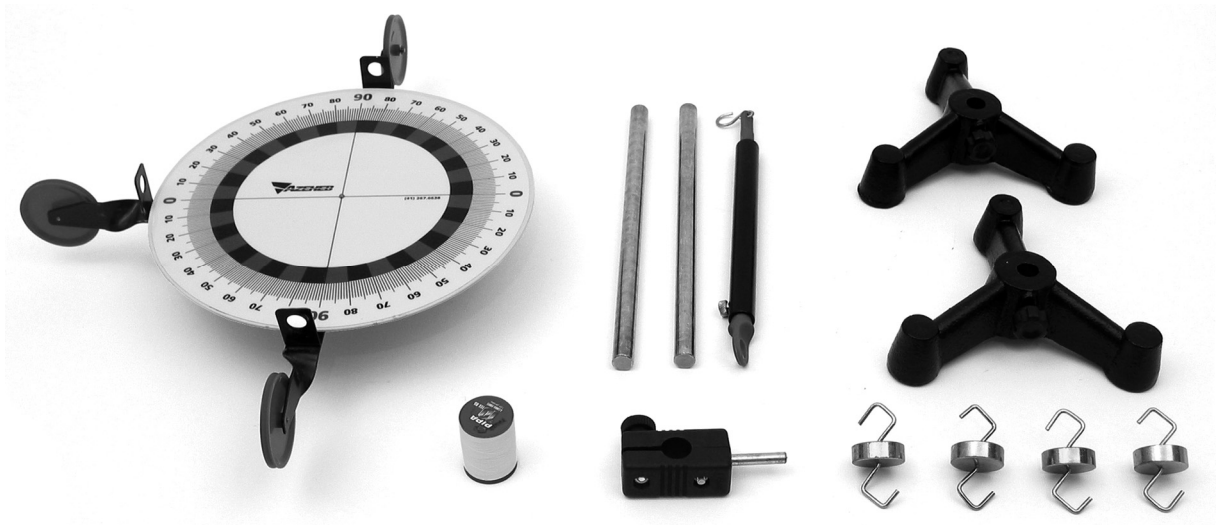

|    |  |
|----|--|
| 01 | dinamómetro de 2N y precisión de 0,02N       |
| 02 | bases de trípode con llave de ajuste         |
| 01 | varilla de 25cm con orificio                 |
| 01 | varilla de 25cm                              |
| 04 | masas aferidas de 50g con gancho             |
| 01 | disco transportador de Ø235mm                |
| 01 | mesa circular de Ø20cm con base y 3 roldanas |
| 01 | carrete de hilo                              |
| 01 | prensa con varilla de 3cm                    |
| 01 | unidad de almacenaje de 40x50cm              |


# ADICIÓN DE VECTORES

## Procedimientos

1. Ajuste el dinamómetro para que marque cero cuando se lo ponga en posición horizontal.
2. Monte el equipo como se muestra en la foto.



3. En las extremidades de los hilos que pasan por las roldanas ponga masas de:  
 $m_1 = 100\text{g}$   
 $m_2 = 50\text{g}$
4. Desplace las roldanas hasta que formen un ángulo de  $60^\circ$ . Desplace la varilla que fija el dinamómetro hasta que el nudo de los cordeles coincida con el centro del transportador. Gire el transportador y ajuste la  $F_1$  en "cero".

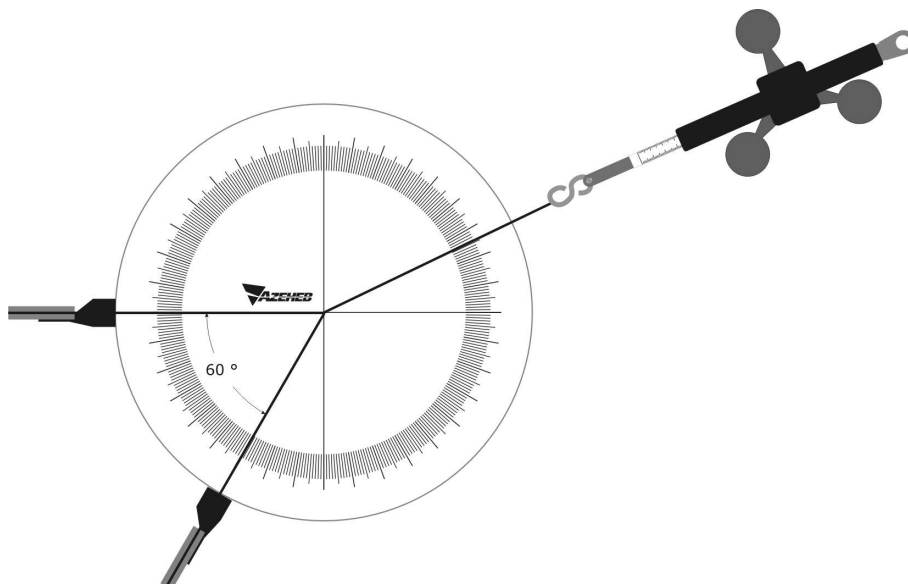

5. Mida el ángulo entre  $F_1$  y  $F_2$ .

$\alpha =$  \_\_\_\_\_

6. Calcule las fuerzas  $F_1$  y  $F_2$ .

$F_1 =$  \_\_\_\_\_ N

$F_2 =$  \_\_\_\_\_ N


7. Anote el valor de la fuerza indicada en el dinamómetro.

$F_D =$  \_\_\_\_\_ N (Fuerza Equilibrante)

8. Determine el módulo de la fuerza resultante entre  $F_1$  y  $F_2$  por el proceso del paralelogramo.

Escala: 1N = 10cm


$F_R =$  \_\_\_\_\_ N

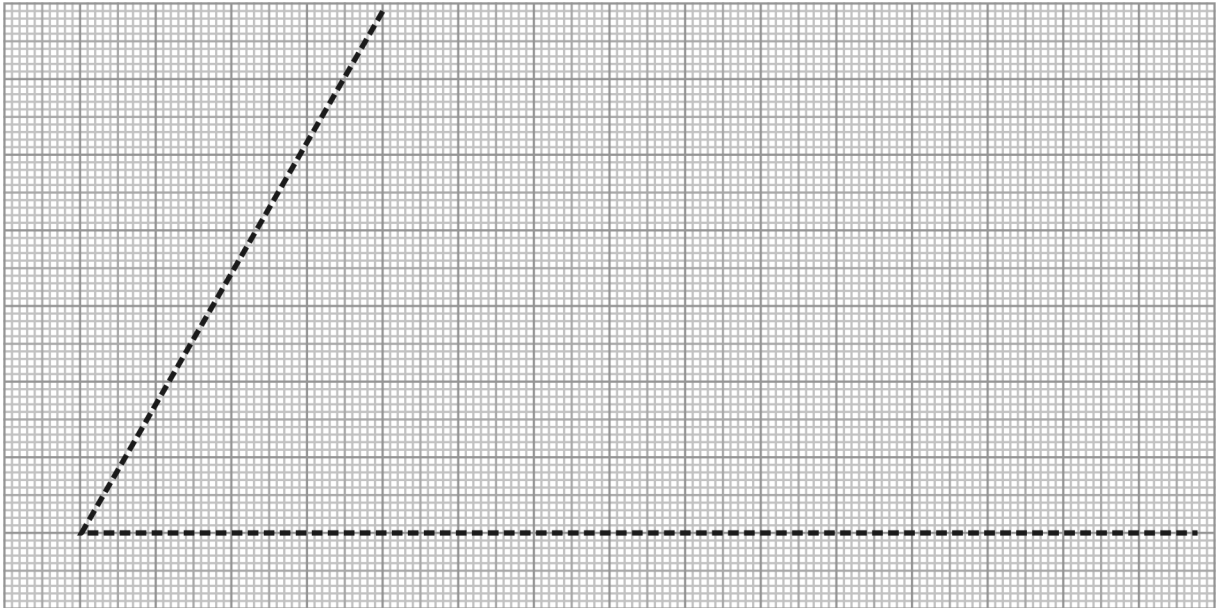

9. Compare el resultado obtenido con el valor indicado en el dinamómetro y calcule el módulo de la fuerza resultante.

$$(F_R)^2 = (F_1)^2 + (F_2)^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha$$

**10.** Repita el experimento para un ángulo de 45°.

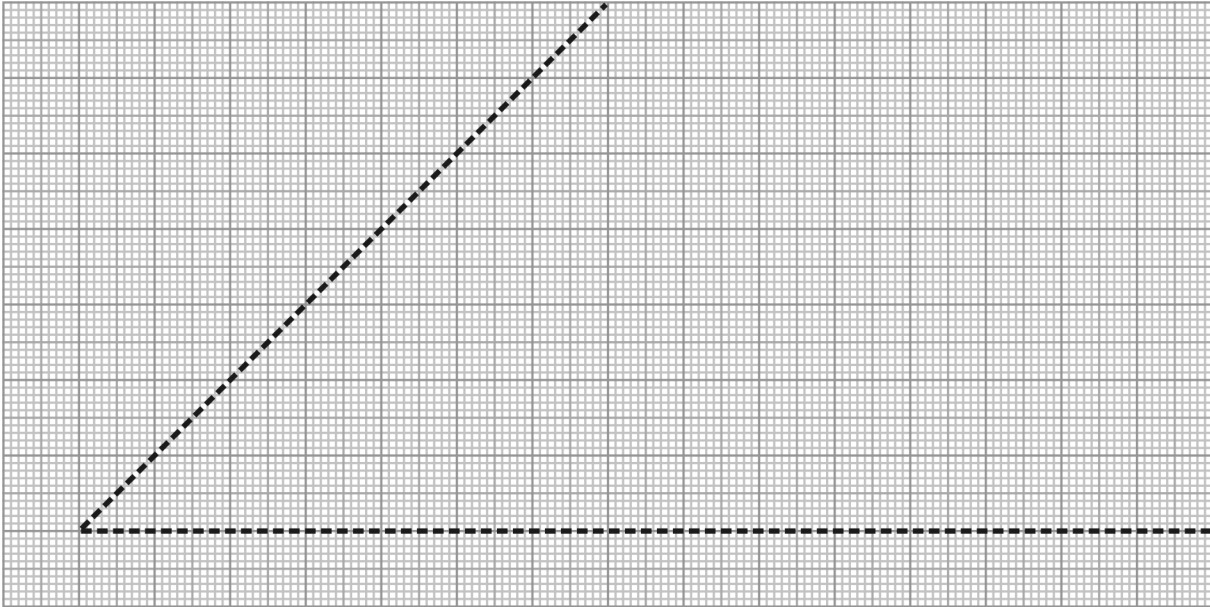


$$(F_R)^2 = (F_1)^2 + (F_2)^2 + 2.F_1.F_2.\cos\alpha$$


# RESULTANTE DE UN SISTEMA DE FUERZAS

## Procedimientos

1. Ajuste el dinamómetro para que indique cero cuando se lo coloque en posición horizontal.
2. Monte el equipo como se muestra en la foto. Ponga masas aferidas en las extremidades de los cordeles que pasan por las **tres** roldanas.

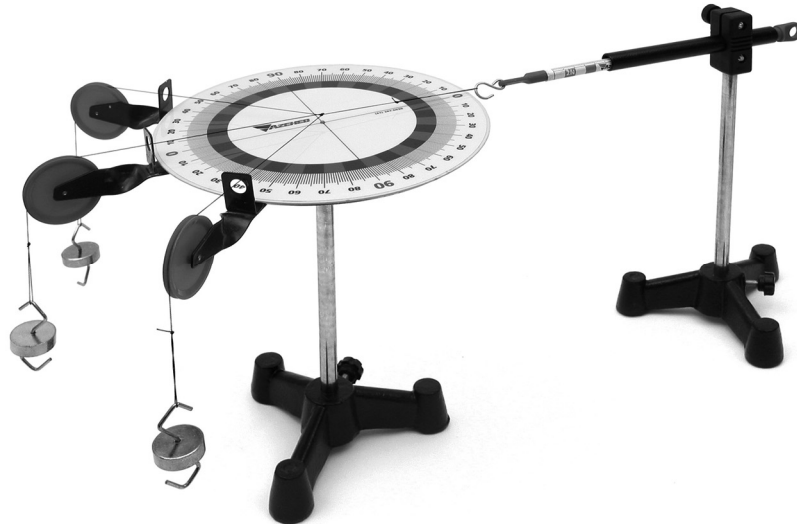

3. Desplace las roldanas y el dinamómetro hasta que el nudo de los cordeles coincida con el centro del transportador.

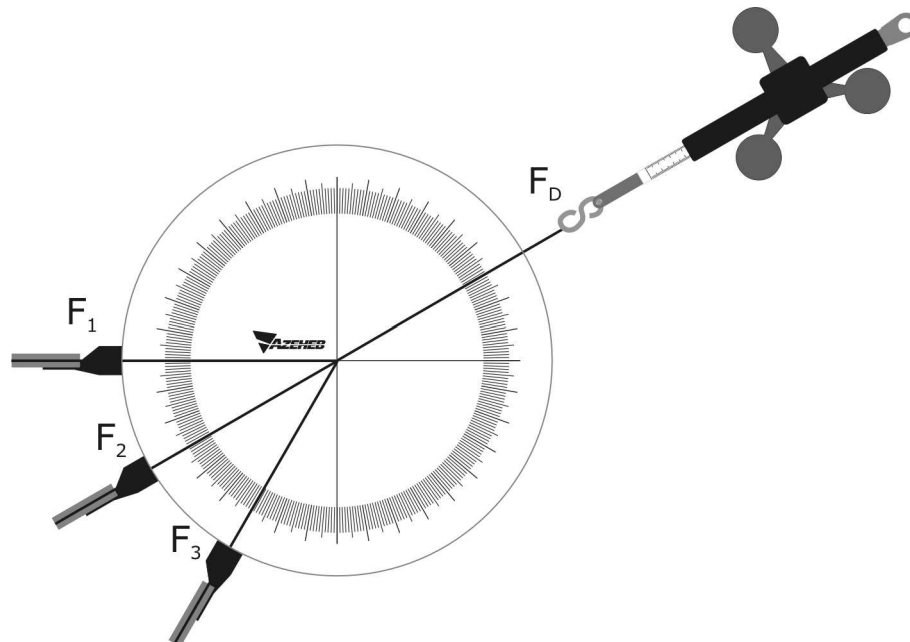


4. Calcule las fuerzas.

$F_1 =$  \_\_\_\_\_ N

$F_2 =$  \_\_\_\_\_ N

$F_3 =$  \_\_\_\_\_ N

5. Anote el módulo de la fuerza indicada en el dinamómetro.  
 $F_D = \underline{\hspace{2cm}}$  N (Fuerza Equilibrante)
6. Trace un sistema de ejes cartesianos en una hoja de papel milimetrado. Represente los vectores  $F_1$ ,  $F_2$  y  $F_3$  en el sistema de ejes cartesianos observando los ángulos que forman con el eje horizontal.

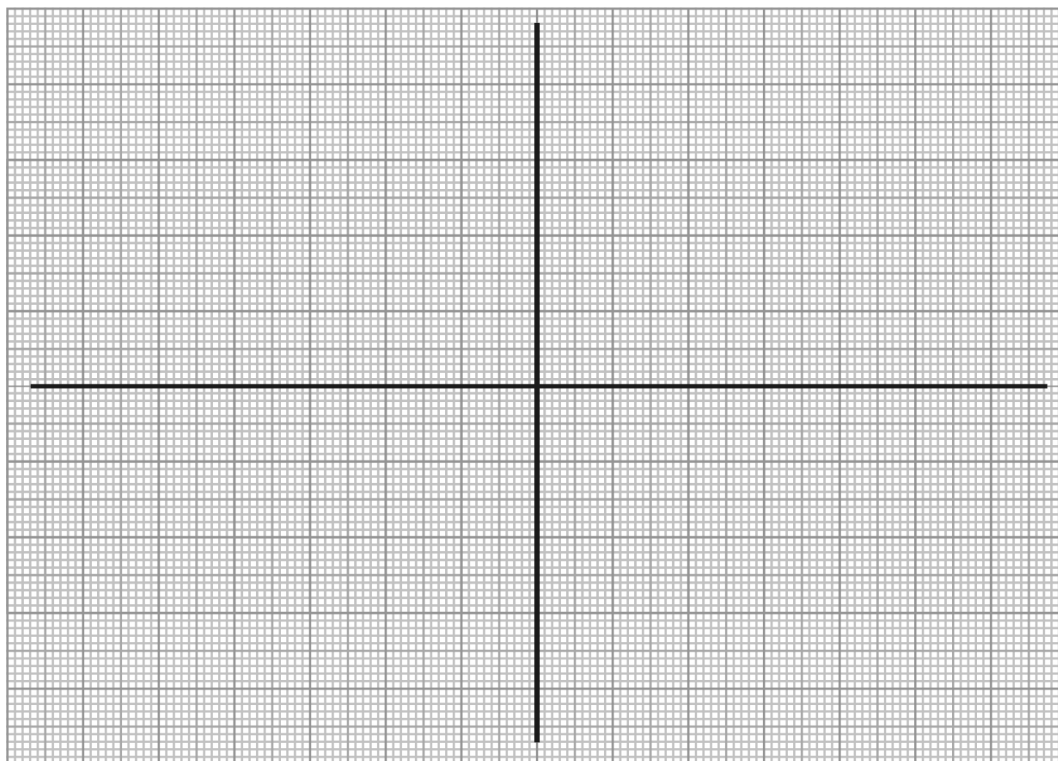

7. Mida el ángulo que  $F_D$  forma con el eje horizontal.  
 $\theta_D = \underline{\hspace{2cm}}$
8. Por el proceso de descomposición calcule el módulo de la resultante del sistema de fuerzas.

*Descomposición*

$$F_{1x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{2x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{3x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{1x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{2x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F_{3x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

*Resultante horizontal*

$$F_{Rx} = \underline{\hspace{2cm}}$$

*Resultante vertical*

$$F_{Ry} = \underline{\hspace{2cm}}$$

*Resultante del sistema*

$$F_R^2 = F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2$$

$$F_R = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N}$$

9. Calcule la dirección de la fuerza resultante.  
 $\theta_R = \underline{\hspace{2cm}}$
10. Compare el valor de  $F_R$  calculada con la fuerza  $F_D$  indicada en el dinamómetro.  
 \_\_\_\_\_
11. Compare la dirección de la fuerza resultante  $F_R$  (calculando) con la dirección de la fuerza indicada en el dinamómetro  $\theta_D$ .  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_